

\*\*2012年5月1日改訂(第5版)  
\*2010年3月1日改訂(第4版)

再使用禁止

#### 一般医療機器

(注) 本添付文書の届出番号、一般的名称、機器の分類等については、  
本付属品の本体である富士ドライケム機器のものを記載しています。


## 富士ドライケム7000 の付属品 (富士ドライケムスライド Hb-WⅡ)

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

富士ドライケムスライド Hb-WⅡ  
の構造は、図のようになっていま  
す。

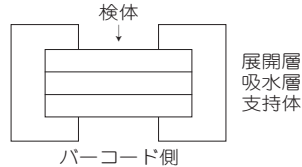

富士ドライケムスライドHb-WⅡ上に、全血10μLを点着します。点着され  
た検体は、展開層で均一に展開しながら、空気中の酸素によってオキシヘ  
モグロビンに変化します。スライドは専用測定機内において、37℃で一定  
時間インキュベーション後、特定の波長で反射測光されます。反射濃度は、  
測定機内に内蔵された検量線により、ヘモグロビン濃度に換算されます。

ヘモグロビン+O<sub>2</sub> → オキシヘモグロビン

### 【使用目的、効能又は効果】

- 乾式臨床化学分析装置の付属品(フィルム式反射測光計セル)
- 本品は以下に示す機器の付属品であり、血中のヘモグロビン濃度の測定に  
使用される。
- \*\*届出番号: 14B2X10002000046 (富士ドライケム7000)

### 【操作方法または使用方法等】

- \*\*1. 測定に必要な機材  
富士ドライケムスライドHb-WⅡ  
使用できる測定機: 富士ドライケム生化学分析装置(測定波長540nm)  
その他の器材: 富士ドライケムQCカード(付属品)  
富士ドライケムクリーンチップ又は富士ドライケ  
ムオートチップ
- 2. 測定操作法  
付属品の富士ドライケムQCカードを専用測定機のカードリーダー部に  
読み込ませ、次いでQCカードに対応したスライドを専用測定機にセッ  
トします。自動点着又はマイクロピペットを用いたマニュアル点着に  
より全血10μLを点着します。一定時間後に測定結果が表示されます。  
各測定機の操作手順は、それぞれの取扱説明書をご参照下さい。
- 3. 測定範囲  
4.0~20.0g/dL (40~200g/L)

### 【使用上の注意】

- 測定ごとに、1枚のスライドを使用します。血液などを一度点着したス  
ライドは、再使用しないこと。
- 使用時には必要枚数だけ冷蔵庫より取り出し、室温に戻してから個別  
包装を開封すること。また、開封したスライドは、速やかに使用する  
こと。
- スライド表面及び裏面の中央部には、直接手を触れないこと。
- QCカードに磁石を近づけないで下さい。
- アルミ包装に破損がある場合は使用しないで下さい。
- 検体について
  - (1) 抗凝固剤  
ヘパリン又はEDTA塩が使用できます。ヘパリンを使用する  
ときは血液1mLあたり50単位以下、EDTA塩は10mg以下にす  
ること。
  - (2) 妨害物質等  
血中の蛋白量は8.5g/dLまでは影響ありませんが、それ以上で  
は正誤差を与えることがあります。血小板は40×10<sup>4</sup>/mm<sup>3</sup>ま  
で影響ありませんが、それ以上では正誤差を与えることがあ  
ります。
- 測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果と合わせて担  
当医が総合的に判断すること。  
参考基準範囲<sup>[1]</sup>  
男 13.5~18.0g/dL (135~180g/L)  
女 12.0~16.0g/dL (120~160g/L)
- 本製品を使用済み後、廃棄する場合は感染性産業廃棄物に該当します  
ので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、焼却、熔融、滅菌、  
消毒等の処理をすること。また、委託して行う場合には、特別管理産  
業廃棄物処分の免許を持った業者に、特別管理産業廃棄物管理票  
(マニフェスト)を添えて処理依頼をすること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法 未開封のまま、冷蔵庫(2~8℃)で保管して下さい。  
有効期間 製造後2年[自己認証(当社データ)による]  
使用期限は外箱に記載してあります。

### 【包装】

50枚入(個別包装)

### 【主要文献及び文献請求先】

[1] 大久保昭行、齋藤侑也 監訳、臨床検査データハンドブック'86(医学  
書院)、90ページ(1986)

文献請求先

\*\*富士フィルム株式会社

メディカルシステム事業部

TEL. 0120-225700 FAX. 03-6418-9350

〒106-8620 東京都港区西麻布2丁目26番30号

### 【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者

富士フィルム株式会社

〒258-8538 神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地

TEL. 0120-771669

製造業者

\*富士フィルム フォトマニファクチャリング株式会社

〒250-0193 神奈川県南足柄市中沼210番地

販売業者

富士フィルム メディカル株式会社

〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26番30号